


ВЗЯТИЕ МАЗКОВ из респираторного тракта



Мазки берут сухим стерильным зондом

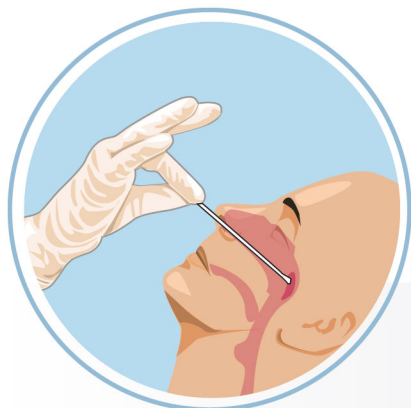

1
из
**ПОЛОСТИ
НОСА**

(Если полость носа заполнена слизью, перед процедурой рекомендуется провести высмаркивание).

Зонд ввести по наружной стенке носа на глубину 2-3 см до нижней раковины. Затем зонд опустить книзу, ввести в нижний носовой ход под нижнюю носовую раковину, сделать вращательные движения, удалить вдоль наружной стенки носа.

Конец зонда отламывают, придерживая крышкой пробирки с расчетом, чтобы он позволил плотно закрыть крышку.



Мазки в ДВУХ
ПРОБИРКАХ

ЗОНД ВЫСТУПАЕТ
из пробирки


В пробирке
НЕТ ЗОНДА

Упаковать мазок в индивидуальный пакет с **ZIP-LOCK**


3

Это позволит избежать контаминации других образцов при неаккуратной транспортировке.

Подходит только для одноразового использования с последующей утилизацией.

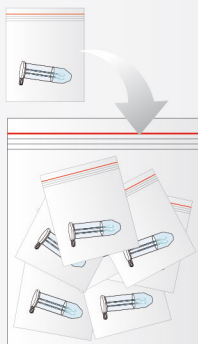

ИЛИ

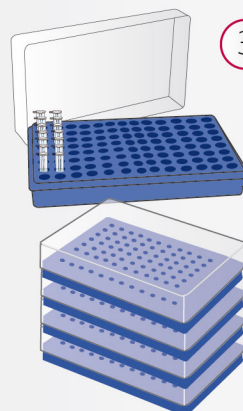

3

Поместить мазок в **ШТАТИВ**

Штативы удобны для транспортировки. Каждый мазок зафиксирован под крышкой, что исключает контакт мазков между собой и с окружающей средой.

Штативы можно использовать повторно, предварительно обработав дезинфицирующим раствором.

4

Отправить мазок в
ЛАБОРАТОРИЮ

(Транспортирование проб осуществляют в специальном термоконтейнере с охлаждающими элементами или в термосе со льдом: при температуре ОТ 2 ДО 8°С В ТЕЧЕНИЕ 1СУТОК)

ВНИМАНИЕ!

При выделении РНК/ДНК с использованием автоматических станций необходимо перенести часть материала в отдельные микропробирки. При переносе биоматериала не захватывать слизь. Не допускается использование пробирок с зондами внутри! Наличие зонда при работе с автоматическими станциями может привести к поломке прибора.

ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕД ВО ФЛАКОНАХ:

(работа проводится в предварительно обработанных дезинфицирующим раствором и ультрафиолетом боксах)

1. подготовить стерильные одноразовые пробирки и наконечники;
2. стерильными наконечниками внести **ПО 0,5 мл** транспортной среды для хранения и транспортировки респираторных мазков в стерильные пробирки типа «Эппендорф» объемом **1,5 мл или 2,0 мл.**;
3. пробирки плотно закрыть и хранить до использования при температуре **от 2 до 8 °С**

Информация для заказа

Наименование	Формат/фасовка	Кат. №
ВЗЯТИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА БИОМАТЕРИАЛА		
Реагент для взятия, транспортировки и хранения мазков из верхних дыхательных путей «Транспортная среда для хранения и транспортировки респираторных мазков «Ампли-Прайм ТСР»	Флакон 50 мл	T303-2
Реагент для взятия, транспортировки и хранения мазков из верхних дыхательных путей «Транспортная среда для хранения и транспортировки респираторных мазков «Ампли-Прайм ТСР»	100 пробирок по 0,5 мл	T303-1
Реагент для взятия, транспортировки и хранения мазков из верхних дыхательных путей "Транспортная среда для хранения и транспортировки респираторных мазков"	Флакон 100 мл	958
Реагент для взятия, транспортировки и хранения мазков из верхних дыхательных путей "Транспортная среда для хранения и транспортировки респираторных мазков"	100 пробирок по 0,5 мл	959
НАБОРЫ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ЭКСТРАКЦИИ ДНК		
Набор реагентов для экстракции ДНК/РНК из биологического материала «МагноПрайм ЮНИ»	96 тестов	102-Z
Комплект реагентов для экстракции РНК/ДНК из клинического материала "АмплиПрайм РИБО-преп"	100 тестов	104-20
Комплект реагентов для выделения РНК/ДНК из клинического материала «РИБО-преп»	100 тестов	K2-9-Et-100
Комплект реагентов для выделения РНК/ДНК из клинического материала «МАГНО-сорб»	100 тестов	K2-16-200
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ТРАНСКРИПЦИИ		
Комплект реагентов для получения кДНК на матрице РНК "РЕВЕРТА-L"	120 тестов	K3-4-100
ОБОРУДОВАНИЕ		
Автоматическая дозирующая станция Microlab STARlet	-	806266
Автоматическая станция выделения нуклеиновых кислот KingFisher Flex	-	A39954
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		
Штатив 96-луночный двусторонний для микропробирок 0,5-2,0 мл с крышкой	-	RP-96
Штатив для лабораторных изделий (для криопробирок и пробирок 1,2-2,0 мл, 81 ячейка, с прозрачной крышкой, голубой, Nuova Aptaca, Италия)	-	6330
Зонд-тампон для отбора, транспортировки и хранения биологических проб (ПС+Виск, ИУ, стерильный, 1 шт./уп., Deltalab, Испания)	1 штука	300202
Микроцентрифужные пробирки градуированные объемом 2,0 мл (Axygen, 500шт./уп.)	500 штук	МСТ-200-С
Микроцентрифужные пробирки градуированные объемом 1,5 мл (Axygen, 500шт./уп.)	500 штук	МСТ-150-С
Микропробирки (с крышкой, 1,5 мл, градуированные, Nuova Aptaca, Италия, 1000 шт./уп.)	1000 штук	1003/G